

entire lower limb. If wrinkles should form, distribute the material as evenly as possible over all areas of your leg, smoothing it upwards from your ankle.

G If you are wearing compression tights, pull the second leg of the tights on in the same way as the first. Once both sides have been pulled up to below the knee, turn the tights back to the right side and pull the individual sections upwards evenly on both legs. Then adjust the fit of the knitted fabric with the flat of your hand.

H Now pull the bodice up to the waist. The gusset should be vertical in the crotch. Important: The tights must not be overstretched. Finally, spread the knitted fabric evenly from bottom to top.

Intended purpose
Compression therapy involves measures to apply extensive, external pressure to treat vein problems and lymph drainage disorders. The aim of the extensive pressure is to prevent the formation of oedema and to support venous return and lymph drainage. Compression garments exert an optimal pressure gradient that gradually decreases from bottom to top. Compression therapy is primarily used to treat vein problems and oedema. It involves the use of compressive and elastic double-stretch fabrics or knitted fabrics that wrap right round the extremities. As a general rule, compression therapy is a long-term treatment requiring appropriate products that are used by the patients themselves when medically indicated and on the instructions from a doctor.

Specific instructions for putting on stockings with gripper elastic
In order to put the gripper elastic on more easily, turn it over twice and do not grip the seam directly

when putting on or taking off. Please correct the position of the gripper elastic when turning down or rolling up. The gripper elastic fits perfectly on non-creamed, non-oiled and slightly hairy skin.

Instructions for taking off
Grip the stocking at the top edge from the inside and outside, simultaneously on the left and right-hand sides. Now pull the stocking downwards to the heel. When doing this, the inside of the stocking will move to the outside. Then, grip the area to the left and right of the Achilles heel, pull the stocking over the heel and then take the stocking off completely.

Important
To prevent any loose threads and ladders caused by the fingernails, we recommend that you wear textured rubber gloves that are obtainable from your healthcare supply store. Knots and thread ends in the stocking are manufacturer elated and must not be cut off or pulled. Rings, sharp toenails and fingernails and defective shoes must be avoided. Keep away from fire. **Please wash before first use.** The product may only be used on intact skin, wounds must be covered if necessary. The medical compression stocking must not be used in wet areas. Sale and adjustment of the product may only be carried out by trained specialists. Combination with other products is possible. This should be discussed with the attending physician or specialist. Wearing the medical compression stocking is not suitable for sports activities or for very active patients. To get used to the product, it is recommended to wear it for hours at an initial time.

Indications
• Chronic venous diseases: Improvement of venous symptoms, improvement of

quality of life in chronic venous diseases, prevention and therapy of venous oedema, prevention and therapy of venous skin changes, eczema and pigmentation, dermatoliposclerosis and atrophie blanche, therapy for venous leg ulcer, therapy for mixed (arterial and venous) leg ulcers (taking into account contraindications), prevention of venous leg ulcer recurrence, pain reduction in venous leg ulcers, varicosis, initial phase after varicose therapy, functional venous insufficiency (in obesity, sedentary occupations, standing occupations), venous malformations

- Thromboembolic venous diseases: Superficial venous thrombosis, deep vein thrombosis, condition after thrombosis, post-thrombotic syndrome, thrombosis prophylaxis in mobile patients
- Oedemas: Lymphoedema, oedema during pregnancy, post-traumatic oedema, post-operative oedema, post-operative reperfusion oedema, cyclic idiopathic oedema, lipoedema, congestion due to immobility (arthrogenic congestion syndrome, paresis and partial paresis of the limb), occupational oedema (standing occupations, sedentary occupations), oedema due to medication if no change is possible
- Other indications: Obesity with functional venous insufficiency, inflammatory dermatoses of the legs, nausea, dizziness in pregnancy, congestive disorders in pregnancy
- In case of pregnancy, changing abdomen circumferences mean that a pregnancy body part should be exclusively used for treatment with pantyhose.

Contraindications
Absolute Contraindications:
Advanced peripheral (arterial) occlusive disease, decompensated cardiac insufficiency, optic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens.

Relative Contraindications: Weeping dermatoses, intolerance of compression stocking material, sensory disturbances of the extremity, advanced peripheral neuropathy (e. g. diabetes mellitus), primary chronic polyarthritis.

Life cycle/ Use period
The life cycle of the product is determined by the natural wear and tear that occurs with correct use. The life cycle is usually 6 months.

Transport and storage
Store and transport in a dry place that is protected against light and damage. A 3-year shelf life is guaranteed under correct storage conditions.

Warranty
The legal regulations of the country in which you purchased the product apply to this product. If you suspect a warranty case, please contact your specialist dealer. Warranty is excluded in case of use not corresponding to the indication, failure to observe the risks associated with use or unauthorised modifications to the product.

Side effects
There are no known side effects when using this product correctly. In addition, the medical compression stocking should be regularly checked for damage or wear by the user. This aid is only intended for the treatment of one patient. To ensure that the treatment is successful, regular check-ups by your doctor are required. Very rarely, medical compression stockings can cause allergic reactions. If acute leg pain or skin irritations should occur whilst the stockings are being worn, please consult your doctor immediately.

Obligation to report
If a serious deterioration in the health condition occurs during use

of this medical device, we kindly ask you to report this to the specialist dealer or to us directly as the manufacturer as well as to the BfArM (Federal Institute for Drugs and Medical Devices). You can find our contact details at the end of these instructions for use.

Disposal
This product must be disposed of in accordance with local regulations at the end of its use.

Washing instructions
Please wash the compression stockings before wearing them for the first time. To wash them, turn

them inside out and put them in a laundry bag. For gentle care, we recommend daily hand washing or delicates washing with preferably Schiebler special detergent; fabric softener or bleach must not be used. Please rinse the stockings thoroughly, press them out between two towels and hang them up loosely. Please do not wring, do not dry on the heater or in the sun, as this will affect the durability. The compression stockings must not be dry cleaned. Please follow the care instructions on the sewn-in textile label. The exact material composition can be found on the sewn-in textile label.

Gültig für / Valid for: Veni KKL 1+2, Venex Micro Light KKL 1+2, Venesso KKL 1+2, Doktus KKL 2+3, Star Cotton KKL 1+2, Veni Dur Extra KKL 3, Business & Holiday KKL 2, Pertex Leicht KKL 1, Doktus mit Naht / DN1 KKL 2, Goldpunkt Karat / GP 75 KKL 2, Goldpunkt KKL 3 + 4



Heinz Schiebler GmbH & Co. KG
Marienallee 74 | D-24937 Flensburg
Tel. +49 (0)461 978 99 90

www.schiebler.de




Rev.-Nr. 61.25.05 - Stand 28.05.2025




**UNSER PRODUKT,
IHRE ENTSCHEIDUNG.
WIR SAGEN DANKE.**

Our product, your choice. Thanks a lot.

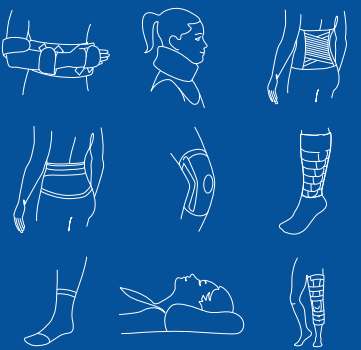

Schiebler


Medizinische Kompression
und Bandagen seit 1949.

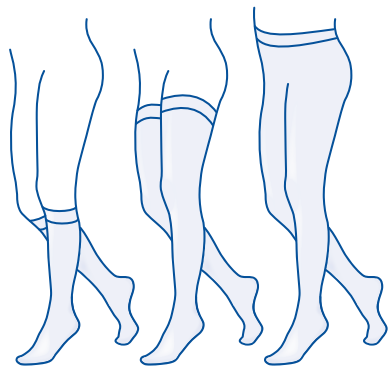

Schiebler

**MEDIZINISCHE
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE**

Medical Compression Stockings

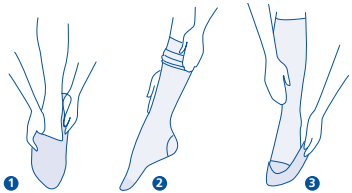

DE

Anziehanleitung für Strümpfe mit offener Spitze

➊ Schlüpfen Sie mit Ihrem Fuß in die beigefügte Anziehhilfe. Halten Sie die Ferse fest und drehen Sie den Strumpf bis auf die Fußspitze auf links.

➋ Setzen Sie den Strumpf mit zwei Händen auf den Fuß und legen Sie den Strumpf so an, dass die Ferse an der richtigen Stelle sitzt. Richten Sie den Strumpf vorsichtig aus, legen Sie ihn vollständig auf das Bein und vermeiden Sie es bitte, zu sehr am Strumpf zu reißen.

➌ Entfernen Sie die Anziehhilfe durch die offene Fußspitze.

Bitte sehen Sie hierzu auch unser Schulungsvideo „Richtiges Anlegen von Medizinischen Kompressionsstrümpfen“ auf unserer Internet-Seite www.schiebler.de

Anziehanleitung für Strümpfe mit geschlossener Spitze

➊ Führen Sie Ihre Hand vorsichtig bis zur Ferse in den Strumpf, um ihn auf links zu drehen.

➋ Halten Sie die Ferse fest und stülpen den Strumpf bis auf die Fußspitze um.

➌ Legen Sie die Fußspitze über die Zehen. Dehnen Sie das Fußteil des Strumpfes und ziehen ihn vorsichtig über den Fuß.

➍ Legen Sie den Strumpf so an, dass die Ferse an der richtigen Stelle sitzt. Den noch auf links gedrehten Teil des Strumpfes ziehen Sie langsam mit zwei Händen am Schienbein entlang nach oben.

➎ Verteilen Sie das Gestrick gleichmäßig am Bein.

➏ Ziehen Sie das Produkt nicht hoch, sondern verteilen Sie es gleichmäßig über die gesamte untere Extremität. Wenn sich Falten bilden sollten, dann verteilen Sie das Material möglichst gleichmäßig in allen Bereichen des Beins, von der Fessel an aufwärts.

➐ Bei einer Kompressionsstrumpfhose ziehen Sie das zweite Bein der Strumpfhose auf die gleiche Weise an wie das erste. Nachdem beide Seiten bis unter das Knie hochgezogen wurden, drehen Sie die Strumpfhose wieder auf die rechte Seite und ziehen Sie die einzelnen Abschnitte gleichmäßig an beiden Beinen nach oben. Korrigieren Sie den Sitz des Gestricks anschließend mit der flachen Hand.

➑ Ziehen Sie nun das Leibteil bis zur Taille hoch. Der Zwickel soll

sich senkrecht im Schritt befinden. Wichtig: Die Strumpfhose darf nicht überdehnt werden. Abschließend verteilen Sie das Gestrick gleichmäßig von unten nach oben.

Zweckbestimmung

Die Kompressionstherapie umfasst Maßnahmen der äußeren, flächigen Druckapplikation bei Venenleiden und Lymphabflussstörungen. Mittels flächigen Druckes soll der Ausbildung von Ödemen vorgebeugt und der venöse Rückfluss bzw. Lymphabfluss unterstützt werden. Kompressionsbekleidung hat einen optimalen Druckverlauf, der von unten nach oben immer geringer wird. Der Schwerpunkt des Einsatzes der Kompressionstherapie liegt in der Behandlung von Venen- und Ödemleiden. Dabei kommen komprimierende, umhüllende und elastische Zweizug-Gewebe bzw. -Gestricke an den Extremitäten zum Einsatz. Die Kompressionstherapie ist in der Regel eine Langzeitbehandlung und bedarf entsprechender Produkte, die von Patientinnen und Patienten bei Vorliegen der medizinischen Indikation auf ärztliche Anordnung selbst angewendet werden.

Besonderer Anziehhinweis für Stümpfe mit Haftband

Zum einfacheren Anziehen das Haftband zweimal umschlagen und beim An- und Ausziehen nicht direkt in die Naht fassen. Bei Umklappen oder


Einrollen des Haftbandes bitte den Sitz korrigieren. Das Haftband sitzt perfekt auf ungecremter, ungeölteter und schwach behaarter Haut.

Ausziehhinweis

Fassen Sie den Strumpf am oberen Rand von innen und außen, links und rechts gleichzeitig an. Ziehen Sie nun den Strumpf nach unten bis zur Ferse. Dabei kehrt sich die Innenseite nach außen. Fassen Sie links und rechts der Achillesferse nach und ziehen den Strumpf über die Ferse und dann komplett aus.

Wichtig

Zur Vermeidung von Ziehäden und Laufmaschen durch Fingernägel empfehlen wir Ihnen das Tragen von geopenoten Gummihandschuhen, die Sie in Ihrem Sanitätshaus beziehen können. Knoten und Fadenenden im Strumpf sind fabrikationsbedingt, dürfen weder abgeschnitten noch gezogen werden. Ringe, scharfe Fuß- und Fingernägel und defektes Schuhwerk meiden. Bitte von offenem Feuer fern halten. **Bitte vor dem 1. Tragen waschen.** Der Verkauf und das Anpassen des Produkt darf nur durch das geschulte Fachpersonal erfolgen. Die Kombination mit anderen Produkten ist möglich. Dies sollte mit dem behandelnden Arzt oder Fachpersonal besprochen werden. Das Tragen des medizinischen Kompressionsstrumpfes ist bei sportlicher Aktivität bzw. für sehr

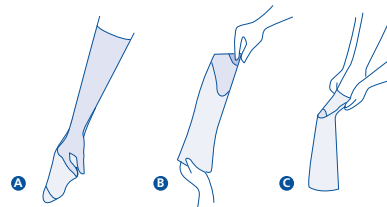

aktive Patienten nicht geeignet. Zur Eingewöhnung an das Produkt wird ein anfänglich stundenweises Tragen empfohlen.

Indikationen

- Chronische Venenkrankheiten: Verbesserung venöser Symptome, Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten, Prävention und Therapie venöser Ödeme, Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen, Ekzemen und Pigmentierung, Dermatoposklerose und Atrophie blanche, Therapie des Ulcus cruris venosum, Therapie des gemischten (arteriell und venös bedingten) Ulcus cruris (unter Berücksichtigung der Kontraindikationen), Prävention des Ulcus cruris venosum-Rezidivs, Schmerzreduktion beim Ulcus cruris venosum, Varikose, initiale Phase nach Varikosetherapie, funktionelle venöse Insuffizienz (bei Adipositas, Sitz-, Stehverufe), venöse Malformationen
- Thromboembolische Venenkrankheiten: Oberflächliche Venenthrombose, tiefe Beinvenenthrombose, Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom, Thromboseprophylaxe bei mobilen Patientinnen und Patienten
- Ödeme: Lymphödeme, Ödeme in der Schwangerschaft, posttraumatische Ödeme, postoperative Ödeme, postoperative Reperfusionsoedeme, zyklisch idiopathische

Ödeme, Lipödeme, Stauungsstände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität), berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe), medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine Umstellung möglich ist

- Andere Indikationen: Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz, entzündliche Dermatosen der Beine, Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft, Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft sollte bei einer Strumpfhosenversorgung, auf Grund der sich verändernden Bauchumfänge, ausschließlich ein Schwangerschaftsleibteil verwendet werden.


Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen: Fortgeschrittene periphere (arterielle) Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coreuola dolens.

Relative Kontraindikationen: Nässende Dermatosen, Unverträglichkeit auf Kompressionsstrumpfmaterial, Sensibilitätsstörungen der Extremität, fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus), primär chronische Polyarthritis.

Lebensdauer/Nutzungsdauer

Die Lebensdauer des Produkts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sachgerechtem Umgang bestimmt

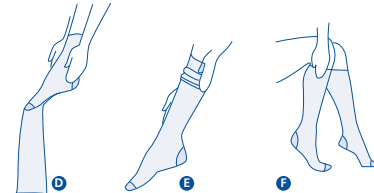

und beträgt in der Regel sechs Monate. Das Produkt ist allein für Ihre Versorgung vorgesehen. Geben Sie dieses nicht an Dritte weiter.

Transport und Lagerung

Trocken und vor Beschädigung und Licht geschützt lagern und transportieren. Bei sachgerechter Aufbewahrung ist eine 3jährige Lagerbeständigkeit gewährleistet

Gewährleistung

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Falls Sie einen Gewährleistungsfall vermuten, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. Ausgeschlossen ist die Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken oder eigenmächtig vorgenommene Änderungen des Produkts.

Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt. Dieses Hilfsmittel ist nur zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Zur Sicherung des Therapieerfolges sind regelmäßige ärztliche Kontrollen notwendig. Darüber hinaus sollte der medizinische Kompressionsstrumpf regelmäßig auf Beschädigungen bzw. Verschleiß durch den Anwender kontrolliert werden. In seltenen Fällen können med.

Kompressionsstrümpfe Allergiereaktionen hervorrufen. Treten beim Tragen akute Beinschmerzen oder Hautirritationen auf, suchen Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt auf. Die Anwendung des Produkts darf nur auf intakter Haut erfolgen, Wunden sind ggf. abzudecken. Der medizinische Kompressionsstrumpf darf nicht im Nassbereich angewendet werden.

Meldepflicht


Kommt es bei der Anwendung dieses Medizinprodukts zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands, dann bitten wir um Meldung beim Fachhändler oder bei uns direkt als Hersteller sowie beim BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

Entsorgung

Nach Nutzungsende muss dieses Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Pflegehinweis

Waschen Sie die Kompressionsstrümpfe vor dem ersten Tragen. Zum Waschen drehen Sie die Kompressionsstrümpfe bitte auf links und geben Sie diese in ein Wäschennetz. Zur schonenden Pflege empfehlen wir die tägliche Hand- oder Schon-

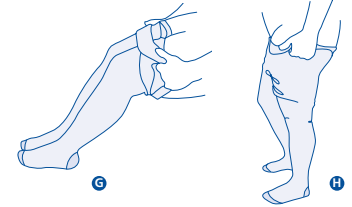

wäsche mit vorzugsweise Schiebler Spezialwaschmittel, Weichspüler oder Bleichmittel dürfen nicht verwendet werden. Spülen Sie die Strümpfe bitte gründlich, pressen Sie sie zwischen zwei Handtüchern aus und hängen Sie sie lose auf. Bitte nicht wringen, nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen, da dies die Haltbarkeit beeinträchtigt. Die Kompressionsstrümpfe dürfen nicht chemisch gereinigt werden. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem eingenähten Textiletikett. Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingenähten Textiletikett.



EN

Donning instructions for stockings with open toe

➊ Slip your foot into the donning aid provided with the stockings. Hold the heel and turn the stocking inside out as far as the toe.

➋ Using both hands, place the stocking over your foot, ensuring

that the heel sits correctly. Straighten the stocking carefully and place it fully over your leg, please take care not to pull the stocking too roughly.

➌ Remove the donning aid through the open toe.

Please also see our training video „Proper application of medical compression stockings“ on our website www.schiebler.de

Donning instructions for stockings with closed toe

➊ To turn the stocking inside out, carefully reach into the stocking right down to the heel.

➋ Hold the heel firmly and turn the stocking inside out as far as the toe.

➌ Put the toe of the stocking over your toes. Stretch the foot of the stocking and gently pull it over your foot.

➍ Make sure that the heel of the stocking sits correctly. Using both hands, slowly pull the rest of the stocking up along your shin.

➎ Distribute the fabric evenly along your leg.

➏ Do not pull the stocking up tight, distribute it evenly over the