


Leiðbeiningar um notkun

OVITRELLE®

ÁFYLLTS LYFJAPENNA



LYFJAPENNINN

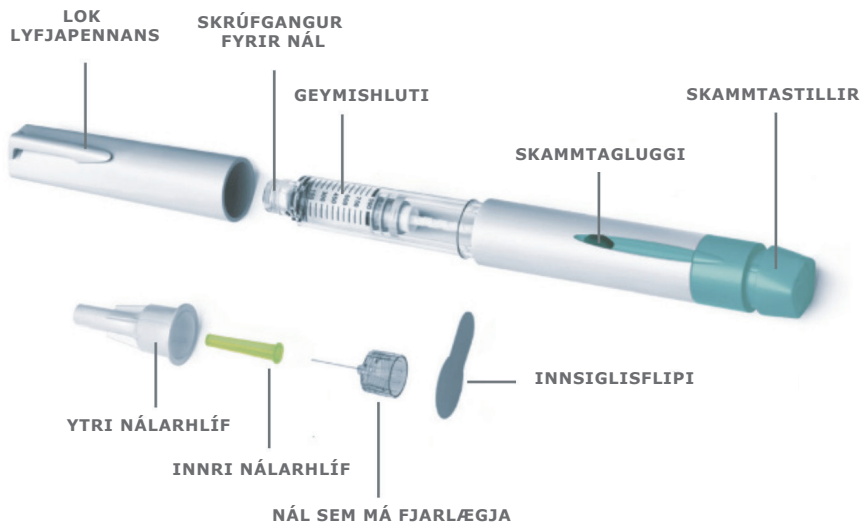

GEYMSLA

Geyma á Ovitrelle í kæli (2° C-8° C).
Má ekki frjósa.

1

UNDIRBÚNINGUR LYFJAPENNANS FYRIR DÆLINGU




Fjarlægðu
innsiglisflipann af
ytri nálarhlífinni.

Mikilvægt er að lesa
notkunarleiðbeiningar
vandlega fyrir inndælingu.
Lesið einnig fylgiseðilinn
vandlega



Skrúfaðu ytri nálarhlífina á
skrúfganginum fyrir nál á
Ovitrelle lyfjapennanum þar
til þú finnur örlitla fyrirstöðu.

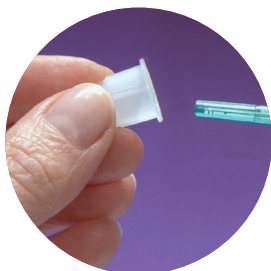

Fjarlægðu ytri nálarhlífina með því
að toga varlega í hana.

AÐ STILLA SKAMMTINN

- Í fyrsta skipti sem þú notar nýjan Ovitrelle lyfjapenna, skaltu leita eftir litlum dropa af vökva á oddi nálarinnar áður en skammturinn er stilltur.
- Stilltu skammtinn á 250 míkrogömm með því að snúa skammtastillingunum réttisælis.
- Vertu viss um að réttur skammtur hafi verið stilltur áður en þú heldur áfram í næsta skref. Skammtaglugginn ætti nú að sýna 250, þann skammt sem lækinnirinn hefur ávísað þér.



Ef þú sérð ekki
töluna 250
í skammtaglugganum
skaltu halda áfram
að snúa réttisælis
þar til talan
250 birtist

INNÐÆLING SKAMMITS

- Veldu stungustað á svæðinu þar sem læknir eða hjúkrunarfræðingur hefur ráðlagt þér að nota til inndælingar. Hreinsaðu húðina.
- Fjarlægðu innri nálarhlífina varlega.
- Þrýstu nálinni hægt inn í húðina og ýttu síðan skammtastillinum eins langt og hann kemst. Haltu skammtastillinum inni í 5 sekúndur til að ljúka fullri inndælingu.
- Haltu skammtastillinum inni þegar þú dregur nálina út úr húðinni.
- Talan sem birtist í skammtaglugganum breytist aftur í 0. Þetta sýnir að fullur skammtur hefur verið gefinn.



EFTIR INNDÆLINGU


FJARLÆGÐU NÁLINA EFTIR HVERJA INNDÆLINGU!

- Settu ytri nálarhlífina varlega aftur á nálina.
- Skrúfaðu nálina af með því að snúa nálarhlífinni rangsælis.
- Settu lok lyfjapennans aftur á.



Lesið vandlega upplýsingar í fylgiseðli fyrir notkun.



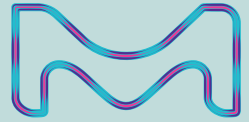

Merck AB
Icepharma
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík
Sími: 540-8000
www.icepharma.is

MER250602 júní 2025



OVITRELLE®
kóriongonadotropín alfa

MERCK