Playsafe Sportmundschutz aus bis zu 4 Farben! Sie können sich Ihren Mundschutz mehrfarbig aus den Farben 1 bis 15 zusammenstellen. (Ausnahme Playsafe Triple)

Bitte geben Sie dazu die Farbnummern an:



hr Sportmundschutz kann mit einem **persönlichen Logo** versehen werden.

Dazu benötigen wir das Motiv als .jpg oder .pdf.

→ siehe Beilageblatt


Übrigens: Jeder Playsafe Sportmundschutz kann bei wechselnden Zahnverhältnissen von Ihrem Zahnarzt wieder angepasst werden...







... und jeder Playsafe Sportmundschutz kann auch über Brackets gefertigt werden. (Ausnahme Playsafe Triple)

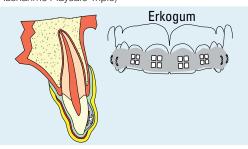

So wählen Sie Ihren Mundschutz aus

- 1 Playsafe-Typ auswählen
- 2 Namen fürs Namensschild bestimmen
- 3 Wunschfarbe(n) auswählen
- 4 Gewünschtes Logo dazu bestimmen (optional)
- **5** Sämtliche Angaben auf dem Beilageblatt eintragen und Ihrem Zahnarzt abgeben







Kreiere deinen persönlichen Sportschutz























Eidg. dipl. Zahntechnikermeisterin Luzernerstrasse 9a 6010 Kriens 041 320 20 60

dentaltechnik-claudiameier@bluewin.ch www.dentaltechnik-claudiameier.ch



PLAY SAFE triple Sportmundschutz

«Keep your smile»











Warum Sport-Mundschutz?

Es gibt Risikosportarten wie Eishockey, Feldhockey, Boxen, Ringen, Squash, Karate, Judo, Motocross usw. wo man sich bewusst ist, nebst anderen Körperschützern auch einen Zahnschutz zu tragen.

Ebenso gehören Fahrradhelme, Schienbeinschützer beim Fussball, Knie- und Ellbogenschützer beim Mountainbiking, Inlineskating, Skateboarding, Volleyball oder Handball heute zur Ausrüstung. Während bei diesen Sportarten ein effektiver Mundschutz oft vergessen geht. Dabei können Stürze auch bei diesen Sportarten öfter zu Verletzungen an Zähnen, Zahnfleisch oder Kieferknochen führen. Dies hat oft besonders schmerzhafte Folgen. Und kann zu aufwendigen und kostenintensiven, teils jahrelangen Versorgungen führen

Warum ein individuell gefertigter Mundschutz?

Ein Playsafe Sport-Mundschutz passt exakt auf die Zahnreihe, sitzt fest, erlaubt freies Atmen und Sprechen.

Ein Boil&Bite Mundschutz (kochen und einbeissen) passt schlecht und lockert sich. Der Sportler muss diesen auf den Zähnen halten, dies hindert ihn an Spitzenleistungen.

Playsafe Sportmundschutz ist immer mehrschichtig: Zwei- oder dreischichtiger SAFE Sport-Mundschutz



z.B. Plavsafe heavy-pro:

- 1. Basis, flexibel (2.0 mm)
- 2. Verstärkung, hart (0.8 mm)
- 3. Deckschicht, flexibel (4.0 mm)

Dreischichtiger PLAY SAFE triple Sport-Mundschutz



Flexibel mit harter Zwischenschicht: > hart > weich, flexibel (Gesamtstärke triple: 5.5 mm/triple light: 4.1 mm)

PLAY SAFE Typen, der Sportart entsprechend



bitte auf dem Beilageblatt ankreuzen



PLAYSAFE heavy-pro, 3-schichtig, mit harter Schicht, für:

Polo Rugby

Eishockey Feldhockey Squash Kickboxen Karate Rollerblading

Sportarten, bei denen äusserst harte und kleinflächige Schläge zu erwarten sind. Preis: ab 360.- (exkl. Zahnarzt)



PLAYSAFE light-pro, 3-schichtig, bei beengten Mundverhältnissen (z. B. Kinder), für:

Polo Rugby

Eishockev Feldhockev Sauash Kickboxen Karate Rollerblading

Sportarten, bei denen äusserst harte und kleinflächige Schläge zu erwarten sind.

Preis: ab 360.- (exkl. Zahnarzt)



PLAYSAFE medium, 2-schichtig, für:

Biking Boxen Fussball Judo Reiten Handball Motocross

Baskethall Ringen Wasserball

Sportarten, bei denen flächige Schläge zu erwarten sind.

Preis: ab 320.- (exkl. Zahnarzt)



PLAYSAFE light, 2-schichtig, bei beengten Mundverhältnissen, für: siehe medium

Playsafe light hat ansonsten die Aufgabe, die Zahnreihen gegeneinander zu schützen, z.B. bei Sportarten, bei denen Helme getragen werden, die den Mittelgesichtsbereich schützen.

Preis: ab 320.- (exkl. Zahnarzt)





PLAY SAFE triple für jede Sportart



bitte auf dem Beilageblatt ankreuzen



PLAYSAFE triple + triple light

3-schichtig, mit harter Zwischenschicht. Triple light ist für kleine Mundverhältnisse geeignet. Beide eignen sich ausserdem für iede Sportart.

Preis: ab 300.-(exkl. Zahnarzt)

Wann PLAY SAFE ?

Die Playsafe Typen werden für bestimmte Sportarten ausgewählt.

Nur der Playsafe heavy-/lightpro weist eine auf den äusseren Zahnbereich beschränkte harte Schicht auf.

Deshalb ist er etwas komfortabler als der Plavsafe triple.

Wann PLAY SAFE triple?

Playsafe triple ist für alle Sportarten geeignet.

Die harte Zwischenschicht umfasst den ganzen Schutz.

Höchste Schutzleistung bei geringster Ausdehnung.

Etwas härter als der Playsafe heavy-pro.

Liebe Sportlerin, lieber Sportler,

jeder Playsafe Sportmundschutz wird von einer geschulten Person nach den Playsafe Richtlinien individuell für Sie hergestellt.

- · Sie bekommen Ihren Playsafe Mundschutz in Ihrer zahnärztlichen Praxis. Dort wird ein Abdruck Ihres Ober- und Unterkiefers genommen.
- Im zahntechnischen Labor wird dann das Gipsmodell und der Sportmundschutz hergestellt.
- Die Kontrolle auf Passung und die Übergabe findet wieder in der zahnärztlichen Praxis statt, inkl. Box und Pflegehinweisen.

Ein original Playsafe Sportmundschutz ist immer laminiert (mind. zwei Schichten), weist die Playsafe Kennzeichnung, den Sportlernamen und die Typenbezeichnung auf.





Farben stehen für Ihren PLAY SAFE und PLAY SAFE triple zur Verfügung.



Wunschfarbe(n) auf dem Beilageblatt angeben.

